



Empezar a ver el mundo de nuevo.

Guía de uso y cuidado del dispositivo PROSE

www.bostonsight.org



BostonSight
464 Hillside Ave, Ste 205
Needham, MA 02494

781-726-7337

TABLA DE CONTENIDOS

Información de contacto	3
-------------------------------	---

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación: aplicación del dispositivo PROSE	4
Protocolo de solución salina sin conservantes	4
Puntos clave para una aplicación óptima del dispositivo PROSE	5
La separación de los párpados lo es todo	6
Cómo aplicar su dispositivo PROSE con un émbolo	7-8
Cómo aplicar su dispositivo PROSE con un émbolo con luz	9
Cómo aplicar su dispositivo PROSE con un soporte de émbolo	10
Burbujas debajo de su dispositivo PROSE	11

EXTRACCIÓN

Preparación: extracción del dispositivo PROSE	12
Cómo extraer su dispositivo PROSE con un émbolo	12
Cómo extraer su dispositivo PROSE sin un émbolo	13

DESINFECCIÓN y CUIDADO

Preparación: su estuche PROSE	14
Preparación: cuidado y limpieza del dispositivo PROSE	15
Protocolo de desinfección nocturna para su dispositivo PROSE	16-17
Protocolo matutino para la aplicación de su dispositivo PROSE	18
Preguntas frecuentes para los pacientes actuales de BostonSight PROSE	19-24
Guía de compra de soluciones y accesorios PROSE	25-29

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www.bostonsight.org
464 Hillside Avenue, Suite 205
Needham, MA 02494

Teléfono principal: (781) 726-7337
Fax principal: (781) 726-7310

Problemas con el dispositivo PROSE, incluyendo su aplicación, extracción o limpieza.

1. Revise esta guía
2. Visite www.bostonsight.org/patient-resources para ver los videos de aplicación y extracción de los dispositivos
3. Llame al 781-726-7494 para dejar un mensaje a un técnico oftalmólogo o envíe un correo electrónico a triage@bostonsight.org

Emergencias para pacientes (solo BostonSight Needham) (fuera del horario de atención, fines de semana o feriados)

Línea de emergencia para pacientes: (617) 755-5929

Tenga en cuenta que la línea de emergencia para pacientes de BostonSight Needham es SOLO para pacientes de BostonSight Needham. Si usted no es paciente de BostonSight Needham, póngase en contacto directamente con su proveedor de PROSE.

La línea telefónica de emergencia NO debe utilizarse en casos de dispositivos dañados o perdidos, preguntas sobre medicamentos o sobre soluciones y limpieza. Llame a nuestra oficina en horario comercial para tratar cualquier asunto que no sea urgente.

Para solicitar un dispositivo PROSE de repuesto o para dispositivos dañados o perdidos, comuníquese con:

Coordinador de dispositivos: (781) 726-7476

Si solicita el servicio de mantenimiento de dispositivos, rellene el formulario que se vincula a continuación e inclúyalo con sus dispositivos.
<https://www.bostonsight.org/patient-resources>

Autorización previa de seguros

Loren Stead: (781) 726-7435

Seguimiento/apelación de reclamaciones de seguros

Lynn Carter: (781) 726-7505

Advertencia

El aumento de enrojecimiento de los ojos, dolor, secreción, sensibilidad a la luz y/o una disminución significativa de la visión pueden indicar una infección y requerir atención INMEDIATA. Póngase en contacto con su oftalmólogo de cabecera y pídale que mantenga informado a su médico de PROSE de cualquier hallazgo.

aplicación

Preparación: aplicación del dispositivo PROSE

Necesitará una toalla suave para colocarla sobre una superficie de trabajo limpia donde aplicará su(s) dispositivo(s).

Necesitará los siguientes suministros:

- Un émbolo de aplicación
- Un émbolo de extracción
- Un espejo pequeño
- Solución salina sin conservantes

Protocolo de solución salina sin conservantes

Tenga en cuenta que la solución salina sin conservantes solo está disponible en línea.

Llenado o enjuague del dispositivo

A continuación se muestran 5 opciones para llenar y enjuagar los dispositivos PROSE:

- ① La solución salina sin conservantes PuriLens Plus es una solución salina estéril tamponada con ácido bórico y borato de sodio. No es una solución de limpieza o desinfección independiente y no sustituye la limpieza y desinfección nocturnas.

ADVERTENCIA: la solución PuriLens Plus no debe utilizarse con la cámara de limpieza PuriLens para PROSE. Esta cámara debe utilizarse para otras lentes de contacto, pero no para los dispositivos PROSE. **Solo deben utilizarse frascos de PuriLens Plus que lleven abiertos menos de 48 horas para el llenado de dispositivos. PuriLens puede utilizarse hasta 2 semanas después de su apertura SOLO PARA ENJUAGUE.**

Después de 2 semanas, debe desecharse toda solución PuriLens Plus restante. La solución PuriLens Plus se puede pedir directamente al fabricante en www.purilens.com o llamando al (800) 622-0777. También está disponible en www.amazon.com.



- ② ScleralFil de Bausch + Lomb es una solución salina isotónica tamponada estéril. Cada caja contiene 30 viales de 10 ml. Está disponible en www.amazon.com o www.dryeyeshop.com.



- ③ Viales de cloruro de sodio al 0.9% para nebulización. Se trata de una solución salina no tamponada y sin conservantes que viene en viales de 3 ml o 5 ml. Un ejemplo son los viales de cloruro de sodio al 0.9% de AddiPak. Puede solicitar una receta; sin embargo, es posible que no estén cubiertos porque están destinados para nebulizadores y se utilizan fuera de las indicaciones aprobadas. También están disponibles para su compra sin receta en www.medontheego.com, www.amazon.com, www.myeyesupply.com o www.dryeyeshop.com.




- ④ LacriPure es una solución salina no tamponada y sin conservantes, disponible en viales de 5 ml en una caja de 98 unidades. Está disponible en www.meniconwebstore.com o www.dryeyeshop.com.




Puntos clave para una aplicación óptima del dispositivo BostonSight PROSE

- ① Antes de comenzar, lávese las manos con jabón no humectante y séquelas completamente con una toalla que no suelte pelusas.
- ② Manipule con cuidado solo los bordes exteriores del dispositivo.
 - Sus dispositivos PROSE pueden tener puntos. Para los pacientes con dispositivos para ambos ojos, el dispositivo DERECHO está marcado con UN punto negro. El dispositivo IZQUIERDO NO tendrá puntos o tendrá DOS puntos negros.
 - Cuando cualquiera de los dispositivos tenga uno o dos puntos negros, el dispositivo debe colocarse con los puntos orientados en la posición de las 12 en punto, a menos que su médico indique lo contrario.

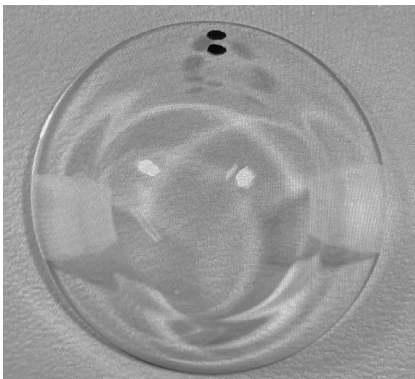


2 puntos = Izquierda

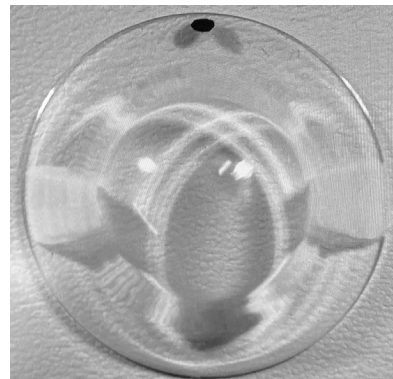

1 punto = Derecha

- ③ Su ojo debe estar BIEN abierto: ¡la separación de los párpados lo es todo! Consulte la página siguiente para ver ejemplos.
- ④ El dispositivo PROSE debe estar centrado entre los párpados.
- ⑤ El émbolo debe estar en posición vertical. Su dispositivo PROSE debe retener la solución salina sin conservantes en el dispositivo para evitar burbujas.
- ⑥ Llene en exceso su dispositivo para mejorar sus posibilidades de una aplicación sin burbujas. Deje que la solución salina gotee (no que fluya) en el recipiente del dispositivo.

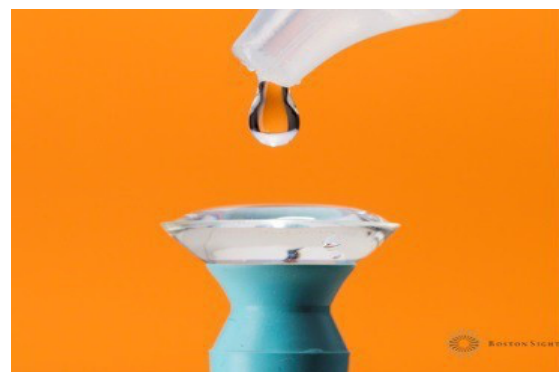

aplicación – separación de los párpados

La separación de los párpados lo es todo



¡Incorrecto! Las yemas de los dedos no están centradas. La separación de los párpados no forma un círculo perfecto.




¡Incorrecto! Los párpados se deslizaron de las yemas de los dedos. Los párpados no están lo suficientemente abiertos.



¡Perfecto! Una abertura redonda con mucho espacio libre para la aplicación del dispositivo.

Cómo aplicar su dispositivo PROSE con un émbolo


- ① Vacíe el contenido del estuche (el dispositivo PROSE) en la palma de su mano. Con la otra mano, sujete **SUAVEMENTE** el dispositivo por los bordes. Nota: el dispositivo debe estar húmedo durante este proceso.
- ② Apriete los lados del émbolo antes de que entre en contacto con el dispositivo.
- ③ Coloque el dispositivo sobre la cara del émbolo y libere la presión lateral del émbolo para crear succión entre el émbolo y el dispositivo.
- ④ Suelte los lados del dispositivo y sosténgalo con el émbolo.

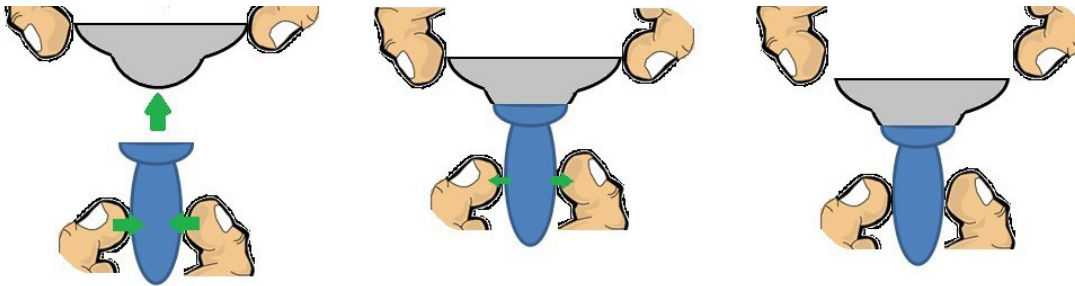

IMPORTANTE: sujetar el dispositivo con los dedos mientras se aplica el émbolo disminuye la fuerza contra el dispositivo. **SIEMPRE** manipule el dispositivo por los bordes cuando intente unir el émbolo al dispositivo. **NO** coloque el émbolo mientras el dispositivo está apoyado sobre una superficie dura, como una mesa o un mostrador. Esto ejercerá una fuerza excesiva sobre el dispositivo, con el riesgo de que se rompa. Nunca apriete los lados ni ejerza presión sobre la cara del dispositivo.

USO INADECUADO DEL ÉMBOLO DURANTE LA APLICACIÓN DEL DISPOSITIVO


- NO aplique fuerza con el émbolo en un movimiento descendente que pueda provocar la rotura del dispositivo
- NO utilice el émbolo de manera que entre en contacto con el dispositivo mientras está apoyado sobre una superficie dura
- NO intente retirar el dispositivo del estuche con un émbolo

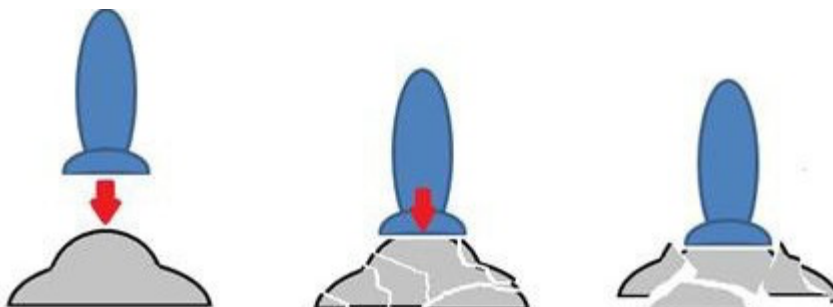

aplicación – émbolo

Cómo aplicar su dispositivo PROSE con un émbolo, continuación


- ⑤ Con el émbolo sostenido verticalmente, llene en exceso el dispositivo con la solución salina sin conservantes. Si se utiliza PuriLens Plus, solo se deben utilizar frascos que hayan estado abiertos durante menos de 48 horas para el llenado de dispositivos. Deje que la solución gotee, no que fluya con fuerza hacia el dispositivo, para evitar la formación de burbujas.
- ⑥ Mantenga la separación adecuada de los párpados. Sostenga los párpados por los bordes, donde las pestañas se unen con los párpados. Los puntos de contacto deben estar centrados en ambos párpados para formar una abertura perfectamente redonda con espacio suficiente para el dispositivo.
- ⑦ Acerque la barbilla al pecho. Mire hacia abajo. Mantenga el émbolo centrado en su ojo concentrándose en el agujero negro del centro del émbolo.
- ⑧ Continúe acercándolo a su ojo de manera suave y constante y mire fijamente el agujero negro como si estuviera mirando a través de él. A algunas personas les resulta útil cerrar el ojo en el que no se está aplicando el dispositivo.
- ⑨ Sentirá el líquido, pero aún no ha terminado. Presione con firmeza el dispositivo sobre el ojo.
- ⑩ Suelte los párpados y capture el dispositivo con ellos. No entrecierre los ojos. Mantenga la presión hacia arriba en el dispositivo mientras aprieta el émbolo para liberarlo del dispositivo.
- ⑪ El dispositivo ya ha sido colocado en su ojo. Continúe presionando el émbolo mientras lo aleja del ojo.
- ⑫ Ahora mire su dispositivo en el espejo. Ilumine la superficie del dispositivo con la luz de una linterna o un teléfono móvil, en ángulo, y busque la presencia de burbujas. Si detecta burbujas, el dispositivo DEBE extraerse y volver a aplicarse.
- ⑬ Después de la aplicación de ambos dispositivos, limpie bien la punta del émbolo con una almohadilla de preparación con alcohol y deje que se seque por completo. Reemplace los émbolos cada 3 meses.

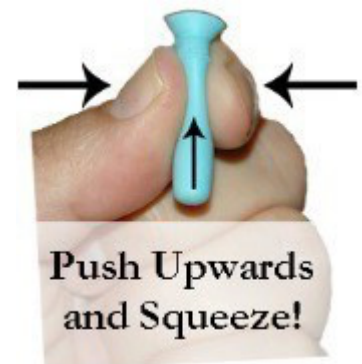

aplicación – émbolo con luz

Cómo aplicar su dispositivo PROSE con un émbolo con luz

- ① Conecte el émbolo a la luz del émbolo insertando la luz en el orificio situado en el extremo del émbolo fenestrado.
- ② Sujete suavemente por los bordes el dispositivo PROSE limpio y desinfectado. Para aplicar a un émbolo de aplicación, apriete suavemente el émbolo en la línea mientras coloca el dispositivo sobre la copa; deje de apretar para crear succión. (Consulte la página 8 para obtener instrucciones completas). Encienda la luz verde presionando el botón negro.
- ③ Con el émbolo sostenido verticalmente, llene en exceso el dispositivo con la solución salina sin conservantes. Si se utiliza PuriLens Plus, solo deben utilizarse los frascos que hayan estado abiertos durante menos de 48 horas para el llenado de dispositivos. Deje que la solución gotee, no que fluya con fuerza hacia el dispositivo, para evitar la formación de burbujas.
- ④ Mantenga la separación adecuada de los párpados. Sostenga los párpados por los bordes, donde las pestañas se unen con los párpados. Los puntos de contacto deben estar centrados en ambos párpados para formar una abertura perfectamente redonda con espacio suficiente para el dispositivo.
- ⑤ Acerque la barbilla al pecho. Mire hacia abajo. Mantenga el émbolo centrado en su ojo concentrándose en la luz verde en el centro del émbolo.
- ⑥ Continúe acercándolo a su ojo de manera suave y constante y mire fijamente la luz verde como si estuviera mirando a través de ella. A algunas personas les resulta útil cerrar el ojo en el que no se está aplicando el dispositivo.
- ⑦ Sentirá el líquido, pero aún no ha terminado. Presione con firmeza el dispositivo sobre el ojo.
- ⑧ Suelte los párpados y capture el dispositivo con ellos. No entrecierre los ojos. Mantenga la presión hacia arriba en el dispositivo mientras aprieta el émbolo para liberarlo del dispositivo.
- ⑨ El dispositivo ya ha sido colocado en su ojo. Continúe presionando el émbolo mientras lo aleja del ojo.
- ⑩ Mire su dispositivo en el espejo. Ilumine la superficie del dispositivo con la luz de una linterna o un teléfono móvil, en ángulo, y busque la presencia de burbujas. Si detecta burbujas, el dispositivo DEBE extraerse y volver a aplicarse.
- ⑪ Después de la aplicación de ambos dispositivos, limpie bien la punta del émbolo con una almohadilla de preparación con alcohol y deje que se seque por completo. Reemplace los émbolos cada 3 meses.

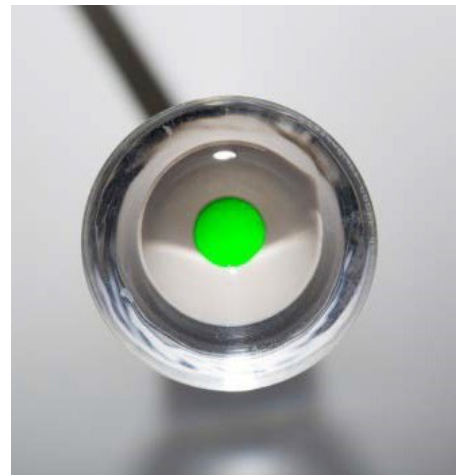

aplicación – soporte de émbolo

Cómo aplicar su dispositivo PROSE con un soporte de émbolo con o sin émbolo con luz

- ① Si usa una luz, conecte el émbolo fenestrado a la luz del émbolo insertando la luz en el orificio en el extremo del émbolo. A continuación, coloque el émbolo en el orificio situado en la parte superior del soporte y pase el cable a través de la ranura del soporte. Encienda la luz. Ajuste la altura del soporte, si es necesario, colocándolo encima de algo como un libro o una caja de pañuelos.
- ② Sujete suavemente el dispositivo PROSE limpio y desinfectado por los bordes y colóquelo sobre el émbolo de aplicación. NO apriete el émbolo para sujetar el dispositivo; esto permitirá que se suelte fácilmente al aplicarlo.
- ③ Llene en exceso el dispositivo con la solución salina sin conservantes. Si se utiliza PuriLens Plus, solo se deben utilizar frascos que hayan estado abiertos durante menos de 48 horas para el llenado de dispositivos. Deje que la solución gotee, no que fluya con fuerza hacia el dispositivo, para evitar la formación de burbujas.
- ④ Sostenga los párpados por los bordes, donde las pestañas se unen con los párpados. Los puntos de contacto deben estar centrados en ambos párpados para formar una abertura perfectamente redonda con espacio suficiente para el dispositivo.
- ⑤ Acerque la barbilla al pecho. Mire hacia abajo. Mantenga el émbolo centrado en el ojo concentrándose en el agujero negro o la luz verde en el centro del émbolo.
- ⑥ Comience a acercarse al dispositivo moviendo la cabeza hacia abajo, de manera suave y constante. El dispositivo que se aproxima y el émbolo deben estar centrados en la abertura y su enfoque debe permanecer en el agujero negro o la luz verde. A algunas personas les resulta útil cerrar el ojo en el que no se está aplicando el dispositivo.
- ⑦ Sentirá el líquido, pero aún no ha terminado. Continúe con el movimiento hacia abajo hasta que el dispositivo quede firmemente presionado contra su ojo.
- ⑧ Suelte los párpados y capture el dispositivo con ellos.
- ⑨ El dispositivo ya ha sido colocado en su ojo. Mantenga el ojo cerrado mientras se endereza, alejándose del émbolo con el dispositivo en el ojo.
- ⑩ Ahora mire su dispositivo en el espejo. Ilumine la superficie del dispositivo con la luz de una linterna o un teléfono móvil, en ángulo, y busque la presencia de burbujas. Si detecta burbujas, el dispositivo DEBE extraerse y volver a aplicarse.
- ⑪ Después de la aplicación de ambos dispositivos, limpie bien la punta del émbolo con una almohadilla de preparación con alcohol y deje que se seque por completo. Reemplace los émbolos cada 3 meses.



Ejemplos de burbujas debajo de su dispositivo PROSE

Burbuja única:



Burbujas múltiples:



Si ve una burbuja, el dispositivo DEBE extraerse y volver a aplicarse.

extracción

Preparación: extracción del dispositivo PROSE




Necesitará una toalla suave para colocarla sobre una superficie de trabajo limpia donde extraerá su(s) dispositivo(s).

Necesitará los siguientes suministros:

- Un émbolo de extracción
- Un espejo pequeño, colocado en posición vertical
- Solución salina sin conservantes

Cómo extraer su dispositivo PROSE con un émbolo



- ① Coloque el espejo en posición vertical sobre la superficie de trabajo.
 - ② Lubrique bien el ojo con varias gotas de la solución salina sin conservantes.
 - ③ Humedezca el émbolo de extracción con la solución salina
 - ④ sin conservantes. Mírese al espejo de frente.
 - ⑤ Al igual que al aplicar su dispositivo PROSE, realice la apertura de párpados adecuada. Es importante asegurarse de que el párpado superior está bien sujeto durante la extracción para evitar arañazos en el ojo.
 - ⑥ Mientras mantiene los párpados separados, cree succión con el émbolo en un ángulo de 45 grados. Apunte a la posición de las 6 en punto en el dispositivo, en el punto donde la parte coloreada del ojo se encuentra con la parte blanca.
 - ⑦ Presione el émbolo de extracción contra el dispositivo de manera firme pero suave. Interrumpa la succión tirando suavemente del émbolo hacia afuera de manera arqueada, con cuidado de no arañar la córnea. En algunas ocasiones, es posible que deba tirar y relajar el émbolo rápida y repetidamente.
- NOTA: si el émbolo se presiona demasiado cerca del centro del dispositivo, directamente sobre la pupila, es posible que no sea posible romper la succión y extraer el dispositivo.
- ⑧ Mantenga la separación de los párpados hasta que el dispositivo esté fuera de su ojo.
 - ⑨ Sujete el dispositivo suavemente por los bordes y retire el émbolo del dispositivo girándolo y maniobrándolo hacia el borde del dispositivo.
 - ⑩ Limpie bien la punta del émbolo con una almohadilla de preparación con alcohol y deje que se seque por completo. Reemplace los émbolos cada 3 meses.

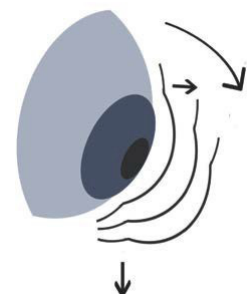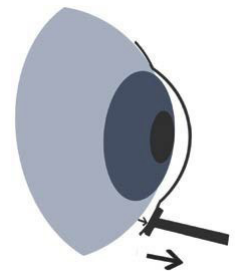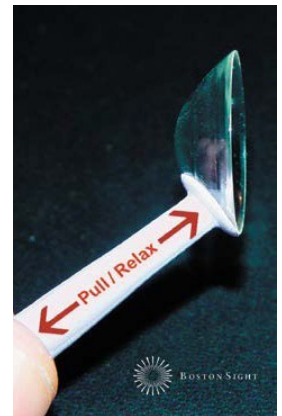


Cómo extraer su dispositivo PROSE sin un émbolo

① Lubrique bien el ojo con varias gotas de la solución salina sin conservantes.


② Presione con la punta de su dedo índice en el borde del párpado superior en la posición de las 12 en punto y empujelo suavemente hacia su ojo justo por encima del borde superior del dispositivo. (Si tiene los ojos hundidos, esto requerirá que lleve el dedo debajo de la ceja y mire ligeramente hacia abajo).

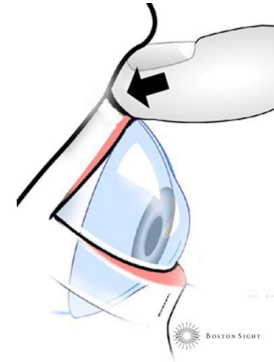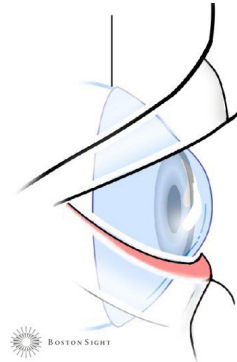


③ Presione con la punta del dedo índice de la otra mano en el borde del párpado inferior, justo debajo del borde inferior del dispositivo, para impedir que el dispositivo se mueva hacia abajo.

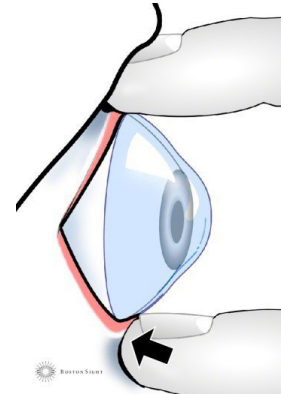

④ Mire hacia arriba hasta que sienta que el dispositivo se bloquea por la presión en el borde del párpado superior.

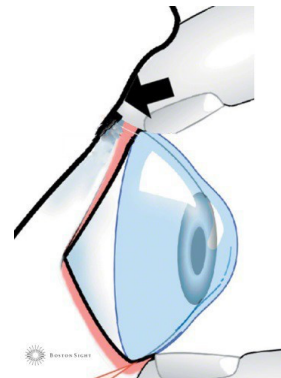

⑤ Retire el borde superior del dispositivo del ojo con el borde del párpado superior, mire hacia arriba y parpadee lentamente para extraer el dispositivo.

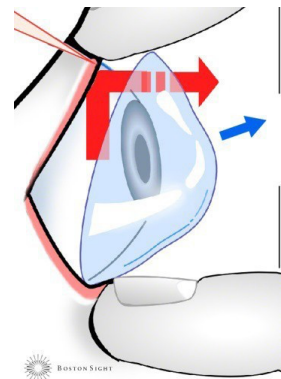

desinfección y cuidado

Preparación: su estuche PROSE

Para empezar, deberá tener una superficie de trabajo limpia y los siguientes suministros:


- Un estuche PROSE
- Un paquete sin abrir de Clear Care
- Tenga en cuenta que puede utilizar Clear Care original o Clear Care Plus



- ① Retire la tapa del estuche PROSE.
- ② Retire la tapa del pequeño estuche Clear Care.
- ③ Retire o rompa el disco de platino del eje en la parte inferior del estuche Clear Care (como se ilustra a continuación).
- ④ Deseche el estuche Clear Care.
***NUNCA intente desinfectar su dispositivo PROSE en el estuche incluido con la solución Clear Care**
- ⑤ Si su estuche PROSE todavía tiene el eje (vástago) unido a la parte inferior del conjunto de la canasta, deberá retirarlo; para hacerlo, sujete el eje con una pinza y dóblelo suavemente hasta que se rompa. Si no lo tiene, continúe con el paso 6.
- ⑥ Coloque el disco de platino del estuche Clear Care en el estuche PROSE para que quede en la parte inferior del estuche PROSE.

El disco de platino debe reemplazarse cada 2 meses.

- ⑦ Su recipiente PROSE ahora está correctamente preparado para la desinfección nocturna.

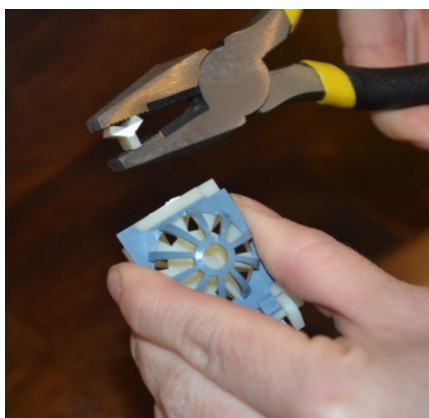

Reemplace su estuche PROSE cada 3 meses.

Preparación: cuidado y limpieza del dispositivo PROSE

Necesitará una toalla suave para colocarla sobre una superficie de trabajo limpia donde limpiará su(s) dispositivo(s).

Necesitará los siguientes suministros:



- Un estuche PROSE con el disco de platino de un estuche de desinfección Clear Care
- Solución salina sin conservantes. Si usa PuriLens Plus, puede enjuagar su dispositivo con PuriLens Plus que haya estado abierto hasta por 2 semanas. Después de 2 semanas, debe desecharse toda solución PuriLens Plus restante.
- Unique pH, Boston Simplus o Tangible Clean*
- Un frasco de Clear Care o peróxido de hidrógeno al 3%

Cualquier Clear Care o peróxido de hidrógeno al 3% usado debe desecharse 90 días después de su apertura.

desinfección y cuidado nocturno

Protocolo de desinfección nocturna para sus dispositivos PROSE

- ① Antes de comenzar, lávese bien las manos con jabón no humectante y séquelas completamente con una toalla que no suelte pelusa.
- ② Coloque el dispositivo en la palma de su mano. Coloque una gota de su limpiador diario en la superficie exterior del dispositivo y frote durante 15 segundos. Coloque otra gota en la superficie interna y vuelva a frotar durante 15 segundos. **NO frote el dispositivo entre sus dedos para limpiarlo. Esto puede hacer que el dispositivo se deforme.**
- ③ Mientras manipula el dispositivo PROSE suavemente por los bordes, enjuague el dispositivo a fondo con solución salina sin conservantes, PuriLens Plus o, para una opción más económica, Bausch + Lomb Sensitive Eyes Plus. Puede enjuagar su dispositivo con PuriLens Plus que haya estado abierto hasta por 2 semanas. Después de 2 semanas, debe desecharse toda solución PuriLens Plus restante. **Bausch + Lomb Sensitive Eyes Plus contiene conservantes y bajo ninguna circunstancia debe utilizarse para llenar dispositivos PROSE.** El uso de una solución salina con conservantes en sus dispositivos puede causar daños en el ojo y la visión. **Nunca use agua del grifo para enjuagar.**
- ④ Separe suavemente la canasta del conjunto de la canasta tirando de la lengüeta ubicada cerca del eje para que la canasta quede horizontal.
- ⑤ Coloque el dispositivo, con la parte cóncava hacia arriba, en la canasta (vea la foto a la derecha). Mientras mantiene la canasta horizontal, baje el conjunto de la canasta sobre la canasta. **Para evitar dañar o perder sus dispositivos PROSE, NO intente llevar la canasta hasta el conjunto de la canasta.**
- ⑥ Repita para el dispositivo izquierdo y colóquelo en la canasta vacía.
- ⑦ Llene el estuche PROSE con solución Clear Care o peróxido de hidrógeno al 3% (H_2O_2) hasta la línea de relleno. No pasa nada si el disco de platino flota hasta la parte superior: la canasta lo empujará hacia abajo.
- ⑧ Coloque el conjunto de la canasta en el estuche y asegure la cubierta. **NO** apriete demasiado la cubierta porque las roscas pueden partirse y romperse. No pasa nada si el disco de platino no se apoya en la parte inferior del estuche. Seguirá funcionando correctamente incluso si está atascado sobre el lateral del estuche. Para que la solución Clear Care o de peróxido de hidrógeno al 3% neutralice correctamente, los dispositivos deben permanecer en el estuche durante **AL MENOS 6** horas. Cualquier Clear Care o peróxido de hidrógeno al 3% usado debe desecharse 90 días después de su apertura.

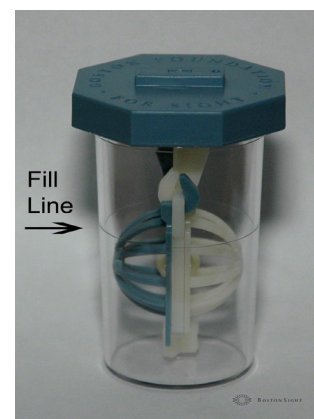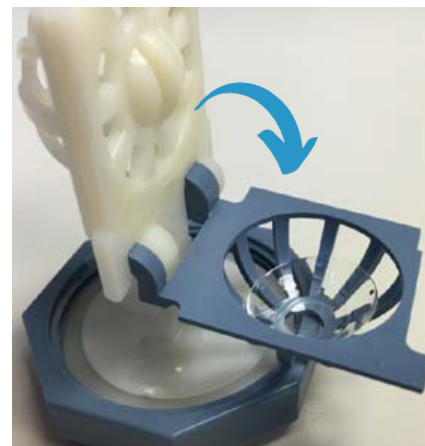

NOTA: si debe extraer los dispositivos antes de que finalice el proceso de desinfección, enjuáguelos bien con una solución salina sin conservantes. A continuación, sumerja los dispositivos en solución salina fresca y sin conservantes dentro de un estuche limpio para lentes de contacto durante al menos 5 minutos. Repita la operación con la solución salina fresca y sin conservantes durante 5 minutos más. Enjuague nuevamente con la solución salina sin conservantes antes de aplicar en el ojo. Si usa un estuche para lentes de contacto con tapa de rosca, deseche la solución, enjuague con solución salina y limpie con una toallita con alcohol. No vuelva a colocar las cubiertas antes de dejarlas secar completamente al aire.

desinfección y cuidado nocturno

Protocolo de desinfección nocturna para sus dispositivos PROSE con peróxido de hidrógeno (H₂O₂) al 3% sin disco de platino Clear Care

- ① Limpie su(s) dispositivo(s) PROSE con su limpiador diario siguiendo **los pasos 1-6** de la página anterior.
- ② Enjuague bien su(s) dispositivo(s) con solución salina.
- ③ Llene el estuche PROSE con peróxido de hidrógeno al 3% hasta la línea de llenado.
- ④ Coloque el conjunto de la canasta en el estuche y asegure la cubierta. **NO** apriete demasiado la cubierta porque las roscas pueden partirse y romperse. Para que la solución desinfecte correctamente, los dispositivos deben permanecer en el estuche durante **AL MENOS 6 horas**.
- ⑤ Por la mañana, retire su(s) dispositivo(s) del peróxido de hidrógeno.
- ⑥ Enjuague bien su(s) dispositivo(s) con la solución salina sin conservantes. Si usa PuriLens Plus, puede enjuagar su dispositivo con PuriLens Plus que haya estado abierto hasta por 2 semanas. Después de 2 semanas, debe desecharse toda solución PuriLens Plus restante.

A continuación, sumerja su(s) dispositivo(s) en la solución salina fresca y sin conservantes, en un estuche limpio para lentes de contacto, durante al menos 5 minutos. Repita la operación con la solución salina fresca y sin conservantes durante 5 minutos más. Enjuague nuevamente con solución salina sin conservantes antes de volver a aplicar en el ojo.

NOTA: el peróxido de hidrógeno al 3% en frasco marrón **NO** está aprobado por la FDA para la desinfección del dispositivo PROSE. No está microfiltrado para impurezas y no contiene tampones estabilizadores ni sales como Clear Care. Algunos pacientes reportan enrojecimiento y/o molestias con su uso. Si en cualquier momento durante el uso de peróxido de hidrógeno al 3% experimenta un aumento del enrojecimiento, ardor o dolor, suspenda su uso y use **SOLO** Clear Care.

Cualquier Clear Care o peróxido de hidrógeno al 3% usado debe desecharse 90 días después de su apertura.

En ningún caso se debe utilizar agua del grifo para enjuagar.



protocolo matutino

Protocolo matutino para la aplicación de su dispositivo PROSE

Necesitará una toalla suave para colocarla sobre una superficie de trabajo limpia donde aplicará su(s) dispositivo(s).

Necesitará los siguientes suministros:

- Un émbolo de aplicación
- Un émbolo de extracción
- Un espejo pequeño
- Solución salina sin conservantes. Si se utiliza PuriLens Plus, solo se deben utilizar frascos que hayan estado abiertos durante menos de 48 horas para el llenado de dispositivos.

- ① Después de lavarse y secarse bien las manos con agua y jabón no humectante, retire el dispositivo del estuche PROSE.
- ② Mientras sostiene suavemente el dispositivo limpio y desinfectado por los bordes, enjuague brevemente con solución salina sin conservantes. **En ningún caso se debe utilizar agua del grifo para enjuagar.**
- ③ Aplique su(s) dispositivo(s) en los ojos con la técnica de aplicación que prefiera.
- ④ Después de cada uso, vacíe el estuche PROSE (teniendo cuidado de no perder el disco de platino) y déjelo secar al aire. NUNCA limpie el estuche de PROSE con alcohol.



NOTA: si experimenta una ligera sensación de escozor tras la aplicación del dispositivo por la mañana, retírelo del ojo inmediatamente y enjuáguelo bien con solución salina sin conservantes. Haga esto hasta que la sensación de escozor se disipe. Enjuague bien su(s) dispositivo(s) con solución salina sin conservantes y luego sumérjalos en una solución salina fresca sin conservantes durante al menos 5 minutos antes de volver a aplicarlos en el ojo. Cuando esto ocurre, es probable que sea una indicación de que debe reemplazar el disco de platino Clear Care.

ADVERTENCIA: el aumento de enrojecimiento de los ojos, dolor, secreción, sensibilidad a la luz y/o una reducción significativa de la visión pueden indicar una infección y requerir atención INMEDIATA. Póngase en contacto con su oftalmólogo de cabecera y pídale que mantenga informado a su médico de PROSE de cualquier hallazgo.

preguntas frecuentes – uso del dispositivo PROSE

**P: ¿Cuáles son los elementos esenciales diarios de mi(s) dispositivo(s) PROSE?
¿Hay disponible un estuche de transporte más pequeño que el proporcionado?**

Los elementos esenciales diarios incluyen:

- Solución salina sin conservantes. Si se utiliza PuriLens Plus, solo se deben utilizar frascos que hayan estado abiertos durante menos de 48 horas para el llenado de dispositivos. Puede enjuagar su dispositivo con PuriLens Plus que haya estado abierto hasta por 2 semanas. Después de 2 semanas, debe desecharse toda solución PuriLens Plus restante.
- Un estuche limpio para lentes de contacto
- Un émbolo de aplicación
- Un émbolo de extracción

Todos los elementos esenciales diarios caben en un pequeño estuche para cámara digital o en un neceser de maquillaje, los cuales puede adquirir en cualquier tienda departamental.

P: ¿Qué tipo de maquillaje de ojos puedo usar mientras uso mi(s) dispositivo(s) BostonSight PROSE? Visite nuestro sitio web para ver una lista de opciones de maquillaje complementarias al uso del dispositivo PROSE en www.bostonsight.org/patient-resources

P: Tengo dos dispositivos PROSE. ¿Cómo puedo distinguir entre el dispositivo izquierdo y el derecho? Para los pacientes con dispositivos PROSE para ambos ojos, el dispositivo DERECHO está marcado con UN punto negro. El dispositivo izquierdo NO tendrá puntos o tendrá DOS puntos negros. El dispositivo debe aplicarse con los puntos orientados en la posición de las 12 en punto, a menos que su médico indique lo contrario.

P: ¿Puedo dormir o tomar una siesta con mi(s) dispositivo(s) PROSE puesto(s)? Puede tomar una siesta de un máximo de 30 minutos. **NO** duerma con sus dispositivos PROSE, ya que esto puede aumentar en gran medida el riesgo de sufrir una infección ocular.

P: ¿Qué debo hacer con mi(s) dispositivo(s) PROSE si me lo(s) quito por un corto período de tiempo para ducharme, nadar o tomar una siesta? Consulte a su médico sobre cómo guardar los dispositivos de manera segura y adecuada durante períodos cortos.

P: ¿Puedo nadar o ducharme mientras llevo puesto mi(s) dispositivo(s) PROSE? No, no se puede nadar ni ducharse con los dispositivos PROSE. La exposición a agua impura y no estéril (grifo, lago, piscina, etc.) mientras lleva puesto su dispositivo PROSE aumenta el riesgo de sufrir una infección que ponga en peligro la vista. Para cualquier otra pregunta específica al respecto, hable con su médico de PROSE.

preguntas frecuentes – uso del dispositivo PROSE

P: Acabo de recibir mi(s) dispositivo(s) PROSE por correo. ¿Cómo los preparo para su aplicación? Los dispositivos PROSE se enviarán en un estuche con líquido. Al recibir su(s) dispositivo(s), siga los siguientes pasos:

1. Lávese bien las manos con agua y jabón no humectante antes de manipular su(s) dispositivo(s) PROSE.
2. Limpie su(s) dispositivo(s) PROSE como se indica a continuación:
 - Coloque un dispositivo PROSE en la palma de su mano.
 - Coloque una o dos gotas de su limpiador diario en la superficie exterior del dispositivo PROSE y frote durante 15 segundos. Gire el dispositivo PROSE, coloque una o dos gotas más de su limpiador diario y frote la superficie interior durante 15 segundos.
3. Mientras manipula su dispositivo PROSE suavemente por los bordes, enjuague con la solución salina estéril y sin conservantes. Si usa PuriLens Plus, puede enjuagarse con PuriLens Plus que haya estado abierto hasta 2 semanas. Después de 2 semanas, debe desecharse toda solución PuriLens Plus restante.
4. Su dispositivo PROSE está listo para su aplicación. Si se utiliza PuriLens Plus, solo se deben utilizar frascos que hayan estado abiertos durante menos de 48 horas para el llenado de dispositivos.

P: Utilizo gotas oftalmológicas medicinales y uso dispositivos PROSE. ¿Cómo se utilizan las gotas?

Si el medicamento se usa una o dos veces al día, coloque la gota para los ojos antes de la aplicación del dispositivo PROSE y después de retirarlo, asegurándose de esperar de 10 a 15 minutos antes de la aplicación del dispositivo PROSE. Si el medicamento es tres veces al día o más, consulte con su oftalmólogo de cabecera para determinar si es aceptable aplicar gotas mientras usa el dispositivo PROSE, ya que la absorción se ve comprometida.

preguntas frecuentes – viajar con dispositivos PROSE

P: Viajo a _____ país/ciudad fuera de EE. UU. ¿Puede decirme dónde hay una farmacia donde pueda comprar las soluciones que necesito para mi(s) dispositivo(s) PROSE? Desafortunadamente, no tenemos forma de saber qué soluciones están disponibles en otros países. Le recomendamos que, para viajes prolongados, empaque las soluciones que necesitará y las envíe usted mismo a su destino o solicite algunos suministros a un distribuidor de EE. UU. para que se los entregue en su dirección de destino.

P: ¿Qué soluciones puedo llevar en un avión?

Puede llevar todas las soluciones necesarias, excepto el peróxido de hidrógeno al 3% y Clear Care, que no están permitidos en un avión bajo ninguna circunstancia. Estos deben estar empacados en su equipaje facturado. Le proporcionaremos una carta de necesidad médica dirigida a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en la que se detalla lo que se le debe permitir llevar en el avión por razones médicas.

preguntas frecuentes – atención de seguimiento

P: ¿Con qué frecuencia debo recibir atención de seguimiento por parte de mi proveedor de BostonSight PROSE?

Una vez que se completa el período de tratamiento global de 6 meses, se espera que los pacientes regresen cada 1 o 2 años a su proveedor de BostonSight PROSE para una evaluación integral del tratamiento de PROSE, o antes si se lo indica su médico.

P: ¿Continúo visitando a mi oftalmólogo u optometrista habitual?

Sí. Debe realizar un seguimiento con su oftalmólogo de referencia dentro de las 3 a 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento con PROSE. Continúe visitando a su oftalmólogo de cabecera para exámenes oftalmológicos completos, incluidos exámenes con dilatación, una vez al año o según su recomendación. BostonSight no realiza atención oftalmológica ni exámenes de la vista de rutina.

P: ¿Qué debo hacer si experimento alguno de los siguientes síntomas?

Suspenda el uso de su(s) dispositivo(s) PROSE y acuda a su oftalmólogo de cabecera o a un centro de emergencias si experimenta alguno de los siguientes síntomas:

- Enrojecimiento/molestia persistente, nunca antes observado
- Mayor sensibilidad a la luz mientras usa su(s) dispositivo(s)
- Dolor de ojos
- Presencia de secreción mucosa
- Ardor

preguntas frecuentes – limpieza del dispositivo PROSE

P: ¿Cuál es el protocolo de limpieza de dispositivos más reciente?

Nos dedicamos a seleccionar los mejores productos y regímenes de limpieza para nuestros pacientes. Esto significa que de vez en cuando cambiamos los productos que utilizamos. El régimen de limpieza actual incluye:

Para la limpieza diaria

- Unique pH, Boston Simplus o Tangible Clean

Para enjuagar

- Solución salina sin conservantes. **Tenga en cuenta que la solución salina sin conservantes solo está disponible en línea.** Si usa PuriLens Plus, puede enjuagarse con PuriLens Plus que haya estado abierto hasta 2 semanas. Después de 2 semanas, debe desecharse toda solución PuriLens Plus restante.
- Para una opción más económica, Bausch + Lomb Sensitive Eyes Plus se puede usar solo para enjuagar antes de la desinfección. Esta solución contiene conservantes y **bajo ninguna circunstancia debe usarse para llenar dispositivos PROSE.** El uso de una solución salina con conservantes en sus dispositivos puede causar daños en el ojo y la visión. **Nunca use agua del grifo para enjuagar.**

Para desinfección

- Clear Care o peróxido de hidrógeno al 3% (H_2O_2). **Cualquier Clear Care o peróxido de hidrógeno al 3% usado debe desecharse 90 días después de su apertura.**

P: ¿Está aprobado el H_2O_2 (peróxido de hidrógeno al 3% en frasco marrón) para su uso con dispositivos PROSE y, de ser así, cómo lo uso?

Sí, puedes usar H_2O_2 , pero su uso viene con un descargo de responsabilidad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN ANTES DE USAR H_2O_2 .

El frasco marrón de peróxido de hidrógeno al 3% NO está aprobada por la FDA para la desinfección del dispositivo PROSE. No está microfiltrado para impurezas y no contiene tampones estabilizadores ni sales como Clear Care. Algunos pacientes reportan enrojecimiento y/o molestias con su uso. Si en cualquier momento mientras usa H_2O_2 en botella marrón experimenta un aumento del enrojecimiento, ardor o dolor, suspenda su uso y use SOLO Clear Care.

El disco de platino que viene incluido con Clear Care (que no está disponible para comprar por sí solo) es necesario para desinfectar adecuadamente sus dispositivos PROSE en el estuche. Por lo tanto, debe comprar Clear Care al menos cada 2 meses para reemplazar el disco de platino.

***NOTA:** en este momento, no podemos recomendar un equivalente genérico de Clear Care disponible en algunas tiendas minoristas (es decir, la marca de la tienda puede decir "se compara con Clear Care" en el paquete). Consulte la Guía de compra de accesorios y soluciones de BostonSight PROSE en las páginas 27 a 30.

preguntas frecuentes – limpieza del dispositivo PROSE

P: ¿Existe una alternativa más barata a la solución salina sin conservantes para llenar mi dispositivo? Sí. Puede utilizar solución para inhalación de cloruro de sodio USP al 0.9% como sustituto. Está disponible en su farmacia local con receta o en línea sin receta en www.medonthego.com. Está disponible en viales de 3, 5 y 10 ml y viene en cajas de 100–144.

NOTA: si bien la mayoría de las personas pueden usar la solución para inhalación de cloruro de sodio USP al 0.9% en lugar de la solución salina sin conservantes, algunas personas desarrollarán un leve enrojecimiento, ardor y/o molestias, ya que no está tamponada. Si desarrolla estos síntomas, suspenda su uso de inmediato y reanude el uso de una solución salina tamponada y sin conservantes. **DEBE LLENAR siempre su(s) dispositivo(s) con solución salina estéril sin conservantes que lleve abierta menos de 48 horas.**

P: ¿Está bien usar las gotas que afirman reducir la acumulación de proteínas en lentes de contacto en mi(s) dispositivo(s) PROSE? Si es así, ¿qué marca debería usar?

****El limpiador enzimático NO está aprobado para dispositivos tratados con Hydra-PEG.**

Sugerimos usar el limpiador enzimático Ultrazyme o el limpiador enzimático líquido Boston One Step como se indica en los prospectos.

- Si usa Ultrazyme, agregue una tableta a su estuche PROSE con Clear Care o una solución de peróxido de hidrógeno al 3% y desinfecte normalmente como se indica en esta guía.
- Si usa Boston One-Step, vacíe un vial en su estuche PROSE con Clear Care o una solución de peróxido de hidrógeno al 3% y desinfecte normalmente como se indica en esta guía.

P: ¿Con qué frecuencia debo reemplazar el estuche y los émbolos de PROSE?

Con el uso adecuado, los émbolos deben reemplazarse cada 3 meses; antes si los bordes se vuelven ásperos, desiguales o la succión ya no es suficiente. El estuche PROSE debe reemplazarse cada 3 meses. Los estuches y émbolos PROSE están disponibles en The Dry Eye Shop: www.dryeyeshop.com/. El disco de platino que viene incluido con Clear Care (que no está disponible para comprar por sí solo) es necesario para desinfectar adecuadamente sus dispositivos PROSE en el estuche y debe reemplazarse cada 2 meses.

P: ¿Dónde puedo comprar mis artículos de limpieza?

Utilice el enlace a la completa Guía de compra de soluciones y accesorios de BostonSight PROSE que se encuentra al final de este manual para obtener más información.

faq – cuidado del dispositivo PROSE

P: ¿Cómo almaceno mi(s) dispositivo(s) PROSE de reserva?

Para el dispositivo PROSE tratado con plasma SIN recubrimiento Hydra-PEG, este se puede almacenar según la recomendación del fabricante en su estuche PROSE sin manipular (sin apertura ni cierre) si no se usa inmediatamente después de la desinfección durante la noche.

Cuando esté listo para usar, límpielo con Unique pH, Boston Simplus o Tangible Clean. Enjuague bien el dispositivo con solución salina sin conservantes antes de aplicarlo. Si usa PuriLens Plus, puede enjuagarse con PuriLens Plus que haya estado abierto hasta 2 semanas. Después de 2 semanas, debe desecharse toda solución PuriLens Plus restante. Si se almacena durante más de 1 semana, recomendamos sacar el dispositivo del estuche PROSE y secarlo con un paño suave. Cuando está completamente seco, el dispositivo PROSE se puede almacenar SECO (sin solución) indefinidamente en un estuche limpio para lentes de contacto con tapa de rosca. Cuando quiera volver a utilizar el dispositivo PROSE, límpielo con su limpiador diario y enjuáguelo bien con solución salina sin conservantes antes de aplicarlo.

En el caso del dispositivo PROSE tratado con Hydra-PEG, asegúrese de guardarlo en líquido en un estuche limpio para lentes de contacto con tapa de rosca si no lo usa después de la desinfección durante la noche. Los dispositivos se pueden almacenar en Unique pH o Boston Simplus según la recomendación del fabricante hasta por 30 días, si no se manipulan (sin apertura ni cierre). Desinfecte su(s) dispositivo(s) durante la noche en Clear Care antes de usarlos. ****Toda solución Unique pH o Boston Simplus sin usar debe desecharse después de 90 días.**

P: ¿Qué implica el mantenimiento de mis dispositivos PROSE? (El mantenimiento incluye el tratamiento con plasma o la reaplicación de Hydra-PEG y el oscurecimiento de los puntos).

Sus dispositivos PROSE están tratados con plasma o se les aplica un recubrimiento Hydra-PEG como último paso de su fabricación. Los tratamientos los hacen más humectables para que la visión y la comodidad mejoren. El simple uso y manejo, así como las soluciones de cuidado, pueden desgastar la superficie tratada. Esto puede hacer que vea nublado con su(s) dispositivo(s) PROSE, lo que requiere un parpadeo más frecuente, una rehumectación y una limpieza de tipo "escobilla" para aclarar la visión. También pueden volverse cada vez más incómodos de usar debido al aumento de la sequedad. En cuanto a la frecuencia con la que pueden necesitar tratamiento, esto varía mucho, desde nada hasta cada 3 a 4 meses.

Si sospecha o se le ha dicho que su(s) dispositivo(s) PROSE(s) necesita(n) ser tratado(s) con plasma:

- Complete un formulario de servicio de dispositivos PROSE en www.bostonsight.org/patient-resources/
- Incluya un cheque para el pago o pague en www.bostonsight.org/patient-resources/
- **Envíenoslos a "Attention: Device Coordinator" (Atención: Coordinador de dispositivos)**
- Le recomendamos que envíe su(s) dispositivo(s) PROSE a través de FedEx, UPS o por otros medios que permitan el seguimiento. Esto reducirá las posibilidades de que se pierdan. Una vez que los recibamos, los trataremos y se los enviaremos de vuelta.
- Si elige que su(s) dispositivo(s) PROSE(s) se le devuelva(n) por correo regular de USPS, no hay costo de envío asociado. Las solicitudes de envío urgente a través de FedEx tendrán un coste adicional. Tenga en cuenta que el pago del envío de FedEx debe realizarse con tarjeta de crédito antes de que se le devuelvan su(s) dispositivo(s). Sin excepción, todos los paquetes, independientemente del método de envío, requieren una firma a la llegada.

Guía de compra de accesorios PROSE



Émbolo de aplicación (copa escleral DMV)

www.dryeyeshop.com

877-693-7939

*Reemplazar cada 3 meses



Émbolo See-Green® (émbolo de aplicación fenestrado)

www.seegreenlight.com/

413-563-2477

*Reemplazar cada 3 meses



Émbolo de extracción (extractor de lentes de contacto DMV Ultra)

www.dryeyeshop.com

877-693-7939

*Reemplazar cada 3 meses



Insertor de lentes esclerales See-Green® (luz)

www.seegreenlight.com

413-563-2477

*registre su insertor de lentes See-Green para obtener una garantía de fabricante de 2 años en www.seegreenlight.com/registration



Sistema escleral See-Green® (luz y soporte)

www.seegreenlight.com

413-563-2477

*registre su See-Green sistema escleral para obtener una garantía de fabricante de 2 años en www.seegreenlight.com/registration



Estuche PROSE (reemplazar cada 3 meses)

www.dryeyeshop.com

877-693-7939

*Reemplazar cada 3 meses

Tanto Dry Eye Shop como See-Green realizan envíos internacionales.

Soluciones PROSE

Soluciones de limpieza diaria



Boston Simplus



Tangible Clean



Unique pH

Soluciones de enjuague y llenado (soluciones salinas sin conservantes y alternativas)


La solución salina sin conservantes solo está disponible en línea.



LacriPure



PuriLens

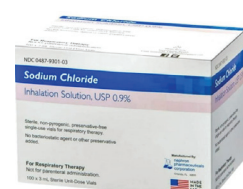

Sodium Chloride 0.9%
for Inhalation



ScleralFil

Soluciones de solo enjuague



B+L Sensitive Eyes

Soluciones desinfectantes



Clear Care



3% hydrogen peroxide

Guía de compra de soluciones

Bausch + Lomb Sensitive Eyes Plus Saline

Disponible en las siguientes tiendas minoristas: CVS, Walgreens, Target, Walmart y la mayoría de los almacenes, y en www.amazon.com, www.cvs.com, www.walgreens.com, www.target.com, www.theonlinedrugstore.com y www.walmart.com

BostonSimplus

Disponible en las siguientes tiendas minoristas: CVS, Walgreens, Target, Walmart y la mayoría de los almacenes, y en www.amazon.com, www.cvs.com, www.walgreens.com, www.target.com, www.theonlinedrugstore.com, www.walmart.com y www.dryeyeshop.com

Clear Care

Disponible en las siguientes tiendas minoristas: CVS, Walgreens, Rite Aid, Target, Walmart y la mayoría de los almacenes, y en www.cvs.com, www.walgreens.com, www.walmart.com, www.theonlinedrugstore.com, www.amazon.com y www.aclens.com

LacriPure

Disponible en www.meniconwebstore.com y www.dryeyeshop.com

PuriLens Plus

Disponible en algunas tiendas minoristas de Harmon Discount Health & Beauty y en línea en www.purilens.com, www.amazon.com, www.walmart.com, www.aclens.com y www.dryeyeshop.com

ScleralFil

Disponible en www.dryeyeshop.com o www.amazon.com

Cloruro de sodio al 0.9% para inhalación

Disponible en su farmacia local con receta y en www.amazon.com, www.walmart.com, www.medonthego.com, www.myeyesupply.com y www.dryeyeshop.com

Tangible Clean

Disponible en www.tangiblescience.com/product/tangible-clean/ y www.dryeyeshop.com

Unique pH

Disponible en Walgreens y Walmart y en www.amazon.com, www.walgreens.com, www.walmart.com y www.dryeyeshop.com

Guía de compra por minorista

www.amazon.com

- Bausch + Lomb Sensitive Eyes Plus Saline
- Clear Care
- Boston Simplus
- PuriLens Plus
- Cloruro de sodio al 0.9% para inhalación
- Unique pH

Tiendas CVS y en línea en www.cvs.com

- Clear Care
- Cloruro de sodio al 0.9% para inhalación (solo con receta médica)
- Boston Simplus

www.dryeyeshop.com

- Boston Simplus
- émbolo de aplicación
- LacriPure
- Estuche Prose
- PuriLens Plus
- Émbolo de extracción
- ScleralFil
- Tangible Clean
- Unique pH

www.medonthego.com

- Cloruro de sodio Addipak al 0.9% para inhalación

www.theonlinedrugstore.com

- Clear Care
- Bausch + Lomb Sensitive Eyes Plus Saline
- Boston Simplus

www.purilens.com

- PuriLens Plus

Guía de compra por minorista

www.seegreenlight.com

- Émbolo de aplicación fenestrado (émbolo See-Green)
- Émbolo con luz (insertor de lentes See-Green)
- Soporte de émbolo (sistema escleral See-Green)

Diríjase a las tiendas minoristas y en línea en www.target.com

- Clear Care
- Boston Simplus

Tiendas minoristas Walgreens y en línea en www.walgreens.com

- Clear Care
- Bausch + Lomb Sensitive Eyes Plus Saline
- Cloruro de sodio al 0.9% para inhalación (solo con receta médica, no disponible en línea)
- Boston Simplus

Walmart y en línea en www.walmart.com

- Clear Care
- Bausch + Lomb Sensitive Eyes Plus Saline
- Cloruro de sodio al 0.9% para inhalación (se requiere receta médica para comprar en la tienda)
- Unique pH
- Boston Simplus

Los siguientes minoristas realizarán envíos internacionales.

- www.amazon.com
- www.seegreenlight.com
- www.dryeyeshop.com
- www.medontheego.com
- www.purilens.com
- www.theonlinedrugstore.com



BostonSight
464 Hillside Avenue, Suite 205 Needham,
MA 02494
(781) 726-7337
<http://www.bostonsight.org>